

医療用

日本産業規格 JIS T9001
医療用マスククラスIII適合

クラスIII

1 2 3

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラス III 規格適合番号 M32110043						
適合番号発行元: JHPA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

サージカルマスク

FUJI BLUE FUJI WHITE

製造地: 静岡県富士市

細菌・飛沫粒子・液体に対するバリア性が
サージカルマスクには求められます。

環境中に放出する湿性汚染から
医療従事者や患者を守ります。



安全の 日本国産

製造場所を日本にすることで、
安定した衛生品質を実現しました。


マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません

 MARUOH

 工場直送の短納期

高性能フィルター※を採用した3層構造で 細菌・飛沫粒子ブロック性と液体バリア性に優れています。

※BFE(バクテリア飛まつ捕集効率)カット / PFE(微小粒子捕集効率)カット / VFE(ウィルス飛まつ捕集効率)カット / (一財)カケンテストセンター検査済

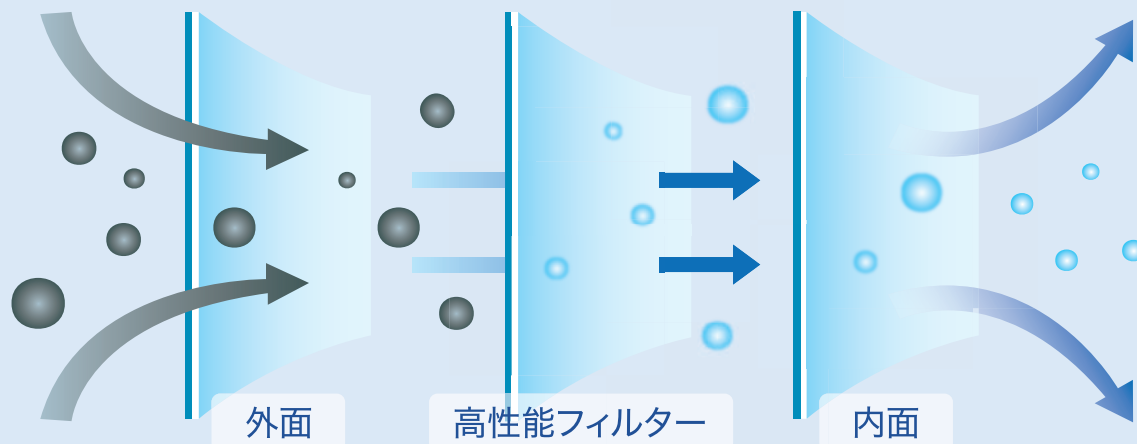

外面・内面

軽くて強度があるスパンボンド不織布を使用。液体バリア性が高く、血液・体液等の湿性物質や細菌・飛沫粒子の侵入を防ぎます。

高性能フィルター

細菌・ウィルスを含む咳や飛沫など、ミクロ粒子をブロックする極細繊維(メルトブロー不織布)を使用しています。

樹脂製ノーズフィッター

顔の形にあわせて変形でき、すき間をつくらない。

不織布3層構造

息苦しさがなく肌触りの良い不織布を使用。

ブリーツ立体加工

口元の空間を保つので呼吸も会話もスムーズ。

ラテックスフリー

アレルギーに配慮したラテックスフリーの素材を使用。

平ゴム使用

ソフトな肌感覚で耳が痛くなりにくい。

耳ひも外側接着

外側からの装着で顔に強力フィット。

(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示

品名	枚数	サイズ	素材
マスク (サージカルマスク FUJI BLUE)	50枚入	175mm×95mm	本体・フィルター部：ポリプロピレン 耳ひも：ポリエステル・ポリウレタン ノーズフィッター：ポリオレフィン
マスク (サージカルマスク FUJI WHITE)			

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品の色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年6月現在のものです。

JANコード

サージカルマスクFUJI BLUE : 4570095860119
サージカルマスクFUJI WHITE : 4570095860126



MADE IN JAPAN 日本製



外箱: 紙



内袋: PE

お客様窓口: 0545-53-9282 | 8:00-17:00 (土日祝日は除く) | ご注文は1ケース単位(50枚×50箱)でお願いします。

製造者: 丸王明王商事株式会社 富士本社 〒417-0854 静岡県富士市宇東川西町1-21